

Sıkça sorulan sorular

1.Biyoenerji masaj cihazı nedir?

Biyoenerji masaj cihazı-Enerji kanalları ve iç organlar hakkında geleneksel Çin Tıbbı teorisi temelinde geliştirilen üst teknoloji cihaz. Bu cihaz,biyoinformatik, enerji, nevroloji ve diğer alanlarda son başarıları kendinde toplamıştır.Akupunktur,guaj masaj,thuin masajı,dağlama ve vakum terapisine benzer kapsamlı bir fizyoterapi etkisi göstermektedir. Enerji kanallarına ve biyolojik olarak aktif noktalara özel fizyoterapi etkisi sayesinde, hızla enerji kanallarının temizliği sağlanmaktadır. Bu da,chi enerjisi ve kan dolaşımının iyileşmesine, iç organların yin-yang dengesinin yenilenmesine ve organizmanın biyolojik enerji seviyesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Biyoenerji masaj cihazının düzenli kullanımı genel profilaktik ve iyileştirici etkinin elde edilmesini sağlamaktadır.

2.Bu ürünün teşvik edilmesi neden gerekli?

Fohow kuruluşu, büyük hayalini gerçekleştirmeye,insan sağlığı için Yang-Sheng sağlığı destekleme kültürünü yaymaya, dünya sağlık endüstrisinde lider olmaya çabalamaktadır.

Şirketimiz geleneksel Çin Tıbbının eski deneyimlerini miras almıştır. Yaşamı Yang-Sheng davranışı, Yang-Sheng psikolojisi, Yang-Sheng beslenmesi şeklinde üç Yang-Sheng felsefesi yönünde ele alıyoruz.Bilinçli davranış kontrolü, duyguları düzenleme ve beslenme diyeti yoluyla sağlıklı yaşam örneğini destekliyoruz, Fohow biyoenerji masajı cihazı ise yeni Yang-Sheng sağlıklı yaşam fizyoterapi yöntemi.

3.Fohow biyoenerji masaj cihazının tanıtımının amacı?

İlerlemenin gerektirdiği şartlar:

- 1) Sağlık modern toplumun temel intiyacıdır.
- 2) Sağlığı iyileştirmede yenilikler, geleneksel Çin Tıbbının yaygınlaşması,farmakolojik olmayan önleyici yöntemlerin geliştirilmesi
- 3) Profesyonel hizmeti geliştirme perspektifleri
- 4) Profesyonel hizmete olan ihtiyaç
- 5) Yürürlükteki mevzuata uygunluk
İşletmeyi geliştirme gerekliliği:

- 1) İşletmenin ve ürünün rekabet avantajını arttırmaktadır
- 2) İlk kullanmadan sonra müşterinin fark ettiği kayda değer hızlı bir etki göstermekte,potansiyel müşteriyle karşılıklı etkileşimi arttırmaktadır
- 3) Maksimum konsantrasyon,tam bağlılık-şirketin gelişiminde temel stratejidir.
- 4) Sürekli daha fazla sayıda partner tüketici ağı genişleyerek şirketimize bağlı olmaktadır.

Partnerin ve müşterilerinin ihtiyacı:

1)Partnerin işini kolaylaştırmaktadır.Potansiyel müşteriyle mesafeyi azaltmayı ,onunla güvenilir ilişkiler kurmayı, daha fazla sayıda sürekli müşteri kazanmayı, “izlenim”, “duygu”, “eğitim” ve “hizmet” pazarlamasından faydalanma sayesinde bunları çevrelerine çekmeyi mümkün kılmaktadır.

2) Müşteri sağlık konusunda iyi duygular hissederek güven ve huzur duygusu edinmektedir.

4.Biyoenerji masaj cihazı satışına izin verilen sertifikalı bir fizyoterapi cihazı mıdır?

Biyoenerji masaj cihazı Fohow kuruluşunun en iyi ürünlerinden biridir.Ürünün tasarımı ve geliştirilmesi sırasında şirketimiz her zaman şu temel prensiplere tutunmuştur: *Yasalılık, güvenlik ve etkinlik;doğal malzeme ve çevreyi koruma; Geleneksel Çin Tıbbı sağlığı destekleme kültürünün bilimsel prensiplerine uygunluk.*

Tüm ürün yasal ve normatif düzenlemelere uygun olmalı, ayrıca gerekli tüm izinlere sahip olmalıdır, ancak bundan sonra piyasaya sürülmesine izin verilmektedir. Fohow biyoenerji masaj cihazı uygunluk belgesi ve satış izni almış, tamamıyla yasal bir üründür.

5.Biyoenerji masaj cihazı güvenli midir? Yan etkisi mevcut mudur?

Biyoenerji masaj cihazı tamamen güvenli bir üründür, bu da kalite uygunluk belgesi ile tasdiklidir. Cihazın çıkış voltajı 8 volt olup, organizmanın hücrenin biyo akımlarıyla uyumludur. Cihaz, onu kullanan müşteri ve uzman için güvenlidir. Elektrik darbelerini insan hücresinin elektrik yüküyle uyumlu biyo akımlara dönüştürmektedir. Biyoenerji masaj cihazı hücrelerin enerjisini yenilemekte, enerji kanallarını serbest bırakmaktadır.

6.Biyoenerji masaj cihazı ne kadar etkilidir?

Bu cihaz çabuk etki göstermektedir ve bu da fazla miktarda kişisel kullanım örnekleriyle tasdiklidir. Biyoenerji masaj cihazının etkisini henüz hissetmediyseniz, biyoenerji masaj işlemini kesinlikle denemenizi tavsiye ederiz.

7.Biyoenerji masaj cihazının çalışma prensibi nasıldır?

Cihaz temel bir ünite ve özel eldivenlerden oluşmaktadır. Enerji kanallarına ve biyolojik olarak aktif noktalara özel fizyoterapi etkisi sayesinde bunların aktif temizliği olmakta ve içlerinde bulunan birincil chi enerjisi yenilenmektedir. Serbest chi sirkülasyonu kan dolaşımını iyileştirmekte ve organizmanın biyoenerji seviyesini arttırmaktadır, böylece Yin-Yang enerji dengesi oluşmakta ve genel profilaktik iyileştirici etki elde edilmektedir.

8.Hangi amaçlarla cihazın kullanımı tavsiye edilmektedir?

Uykusuzluk, nevrozlar, mide-bağırsak rahatsızlıkları, iştahsızlık, kabızlık, hemoroit, kaşıntılı cilt, romatizmal hastalıklar, artrit, servikal spondiloz, bel ve bacak ağrısı, yaralanmalar, yumuşak doku hasarları, kemik hasarları, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, prostat hipertrofisi, anemi, hipertansiyon, hiperglisemi, diyabet, beyin sarsıntısı sonrası komplikasyon, iskemik hastalıklar, menopoz, aşırı yorgunluk.

9.Cihazın kullanımı konusunda geniş yelpazeyi nasıl açıklıyorsunuz?

Enerji kanalları hakkında Geleneksel Çin Tıbbının temel teorisine göre: Durgunluğun olmadığı yerde ağrı olmaz; durgunluk olan yerde ağrı ortaya çıkar. Durgunluklar-chi sirkülasyonuna engeldir, çok sayıda hastalığın ortaya çıkma nedenidir.

Enerji kanalları-İnsan yaşamının, vücudun iç organları ve tüm bölümleriyle bağlantılı olan çizgileridir. Geleneksel Çin Tıbbında meridyenlerle problemler hastalıkların ortaya çıkma nedeni olarak ele alınmaktadır. Buna uygun olarak, iyileşmenin ve sağlığı devam ettirmenin anahtarı, enerji kanallarının serbest olmasıdır. ("Neytzin". Sarı İmparator'un risalesi Çin'de ilk klasik tıbbi eserdir).

10.Biyoenerji masaj cihazı kimlere tavsiye edilmektedir?

Uykusuzluk problemi olan, mide bağırsak sisteminde işlev bozukluğu olan, romatizma, hipertansiyon, hiperglisemi, şeker hastalığı, iskemik hastalıkları olan, aşırı yorgunluğu bulunan kişilere önerilmektedir. Cihazın öncelikle fazla yüke maruz kalan genç ve yaşlı insanlarda uygulanması tavsiye edilmektedir.

11.Biyoenerji masaj cihazının kullanımında kontrendikasyonlar ve ihtiyati önlemler var mı?

Biyoenerji masaj cihazının kullanılmasının tavsiye edilmediği bir dizi kontrendikasyon mevcuttur:

- 1.Eğer müşteri işleme şüphesiyle yaklaşıyorsa ve masajı yapan uzmanla etkileşimde bulunmayı istemiyorsa.
- 2.Tümörler, hematnoz, enfeksiyon hastalıkları, ruhsal bozukluklar, ağır kalp hastalıkları, beyin ve akciğer patolojisi.
- 3.Kemik kırıkları, kanamalar ve kanama tehlikeleri, kas, tendon ve bağ yırtılmaları, pürülan artrit, cilt kaplamasının zarar görmesi, ülserler, çibanlar ve apseler.
- 4.Omurganın malformasyonları, omurga kanalının kemik darlığı, intervertebral foramen stenozu.
- 5.Hamilelik, adet dönemi, doğum sonrası kanamalar.

6. Yaşla ilgili güçsüzlükler, aşırı yorgunluk, aşırı açlık; en erken yemekten ve alkol aldıktan yarım saat sonra biyoenerji masaj cihazının kullanılması tavsiye edilmektedir.

7.Yüksek kan basıncı (En fazla 160 mmhg, en az 120 mmhg) kalp ameliyatları, kalp pili mevcudiyeti ve diğer implantların mevcudiyeti.

8. 8 yaşından ufak çocuklar.

9.Fırtınalı havalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

12.Bazı hastalıklar durumunda biyoenerji masaj cihazının kullanılması niçin yasaktır?

Biyoeenerji masaj cihazı hastalıkların önlenmesi ve sağlığın desteklenmesi için geliştirilmiştir, hastalıkların tedavisi için değil. Kullanmanın yasak olduğu bir dizi hastalık mevcut, kullanmadan önce kontrendikasyonları mutlaka okuyunuz.

13.İşlem sırasında üzerinizde cep telefonu ve metal süs eşyaları bulundurmamak mümkün mü?

Hayır bu cihazın çalışmasını etkilemektedir; işlem sırasında tüm metal süs eşyalarını çıkarmanız ve doğrudan yakınınızda haberleşme cihazı bulundurmamanız gerekmektedir.

14.Masajı yapan uzman için biyoenerji masaj cihazının bir zararı var mı?

Biyoeenerji masaj cihazının kullanımı hem müşteri hem de uzman için güvenlidir, dahası, Yin-Yang enerji dengesinin yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

15.Biyoeenerji masaj cihazı nasıl bir etkiye sahiptir

Fohow Biyoenerji masaj cihazının temel işlevi:

- 1.Toksinlerin atılması, kanın temizlenmesi
2. Kan dolaşımının iyileşmesi
- 3.Metabolizmanın iyileşmesi
- 4.Hücrenin aktivitesinin artması, bağışıklığın güçlenmesi, organizmanın kendi kendini yenilemesi
- 5.Ödemlerin atılması, anestezi, kemik ve kasların güçlenmesi
- 6.Vejetatif sinir sisteminin düzenlenmesi, uyku kalitesinin artması
- 7.Endokrin sisteminin düzenlenmesi, kozmetik etki, vücut ağırlığında azalma
- 8.Enerji kanallarının serbest kalması, kandaki tıkanıklığın ortadan kalkması

16.İyileşme olması için işleme ne kadar süreyle devam edilmesi gerekmektedir?

Biyoenerji masaj cihazı önleyici ve sağlığı destekleyicidir. Kullanma sürecinde organizma toksinlerden temizlenmekte, kan dolaşımı ve metabolizma iyileşmekte, enerji kanalları serbest kalmakta, iç organların Yin-Yang enerjileri düzenlenmekte, hücreler aktive olmakta, bağışıklık güçlenmektedir. Bu suretle organizmanın kendi kendini yenileme yeteneği gelişmektedir. Sonuçta insan acı verici durumdan çıkabilmekte ve kendi kendini iyileştirme etkisi elde edebilmektedir. Geleneksel Çin Tıbbı düzenleme prensiplerine dayanarak kısa kur 7 gün, tam kur 30 gün sürmektedir. Tam kuru geçtikten sonra kayda değer değişiklikler hissetmek mümkündür.Şüphesiz, kur süresi belirli bir insanın sağlık durumuna dayanarak belirlenmektedir.Cihazın düzenli kullanımı sağlığın iyi olmasını desteklemekte, gençlik ve güzelliği muhafaza etmektedir.

17.Biyoenerji masaj cihazı enerji kanallarını hangi şekilde serbest bırakmaktadır? Çalışma prensibi nasıldır?

Biyoenerji masaj cihazı- Ana ünite ve özel eldiven çiftinden oluşan üst teknoloji bir cihazdır. Enerji kanallarına ve biyolojik olarak aktif noktalara fizyoterapi etkisi sayesinde tıkanıklık ve kitlenmeleri anında ortadan kaldırmaktadır. Enerji kanallarına ve biyolojik olarak aktif noktalara özel fizyoterapi etkisi yardımıyla bunlar anında serbest kalmakta ve başlangıçta içlerinde bulunan chi enerjisi yenilenmektedir. Geleneksel Çin Tıbbı açısından chi enerjisi kanın hareket etmesine sebep olmaktadır. Chi enerjisi ve kan serbestçe dolaşırsa organizmada yeteri miktarda enerji ortaya çıkmakta ve iç organların gerekli Yin-Yang dengesi elde edilmektedir.

18.Cihazı kullanma tekniği yeterince basit mi? Buna sahip olmak kolay mı? Bunu nerede ve nasıl yapmalıyız?

Biyoenerji masaj cihazı tüm ailenin sağlığını desteklemek için ev cihazı olarak geliştirilmiştir. Bu yüzden kullanımı oldukça kolaydır. Kullanma tekniğini öğrenmek oldukça basittir. Bunun için iki saat kullanmak yeterlidir, ev koşullarında kullanma tekniğini edinmek için üç günlük eğitim yeterlidir. Şirketimizde size bunu öğretecek uzmanlar bulunmaktadır. Eğer cihazı satın aldıysanız uluslar arası ticaret kolejinin ve dünya birliği araştırma enstitüsünün ücretsiz akupunktur ve yakı eğitimlerine katılabilir ve cihazla ilgili eğitimden geçtiğinize dair sertifika alabilirsiniz. Cihazla çalışma konusunda daha fazla ileri teknik edinmek istiyorsanız, orta ve üst düzey uzman hazırlığı konusunda şirketimizin özel seminerlerine katılabilirsiniz.

19.Biyoenerji masaj cihazını niçin doğal ve güvenli yenilenme tekniği olarak adlandırıyoruz?

Biyoenerji masaj cihazı insan sağlığı için zararlı ve yan etkisi bulunmayan, travmatik olmayan bir fizyoterapi tekniğidir. Dahası işlemin kendisi rahatsızlığa neden olmamaktadır ve oldukça hoştur. Bu suretle, hipertansiyon, hiperglisemi, anestezi, endokrin sisteminin düzenlenmesi, uyku kalitesinin artışı, omurganın düzeltilmesi, cinsel fonksiyonlarda iyileşme, yaşlanma sürecinin geciktirilmesi tamamen farkedilmeden olmakta, kozmetik bir etki elde edilmektedir.

20.Özel bir tıbbi eğitim almadan bu cihazın kullanımını öğrenmek mümkün mü?

Evet, tabii ki. Cihazı kullanmak için temel becerileri iki saat içinde edinebilirsiniz. Ev cihazını önleyici amaçlarla kullanmak için üç gün eğitim almanız yeterli.

21.Biyoenerji masaj cihazı fiyatına dâhil olanlar nelerdir?

Cihazı satın aldığınızda, otomatik olarak ona hâkim olma becerilerini öğrenme imkanı elde etmiş oluyorsunuz. Özel beceri ve teknik olmadan cihazın işleyiş etkisinin sadece % 20 sinden faydalanabileceğiniz unutmayınız.

22.Bu ürünün benzerleri piyasada mevcut mu?

Mevcut. Onlar hakkında internetten kolayca bilgi edinebilirsiniz. Ancak diğer cihazların üreticileri benzer bu cihazların güvenliği ve etkisi hakkında her zaman garanti veremiyorlar, dahası bunların çoğu sağlığa zarar bile verebilir. Bu yüzden denetimi yapılmayan üreticilerin cihazlarını satın almanızı önermiyoruz. Fohow biyoenerji masajı cihazı- fizyoterapi alanında eşsiz bir tasarım olup, etkisini ve güvenliğini uygulamada göstermiştir.

23.Biyoenerji masaj cihazının tekniği piyasada mevcut olan diğer benzer cihazlardan farklı mı?

Evet, tabii ki. Fohow biyoenerji masaj cihazı titizlikle geliştirilen modern bir teknolojidir, şirketin uzun yıllar yaptığı araştırmaların bir sonucudur.

24.Biyoenerji masaj cihazı zararlı elektromanyetik radyasyon oluşturmaktadır mı?

Fohow biyoenerji masaj cihazı zararlı elektromanyetik radyasyonun oluşmadığını, yan etkilerinin olmadığını kanıtlayan yetkili kuruluşların gerekli test ve denetimlerinden geçmiştir.

25.Biyoenerji masaj cihazının kullanımında akut bir reaksiyon ortaya çıkmaktadır mı?

Farklı yaş kategorilerinde, farklı sağlık durumunda olan insanlarda biyoenerji masaj cihazının kullanımı sürecinde farklı reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insan cihazın kullanımı sırasında herhangi bir rahatsızlık hissetmeyecektir, hastalık arifesinde veya hasta kişilerde akut reaksiyon ortaya çıkabilir.Organizma ne kadar güçsüzse,reaksiyon vermesi o kadar fazla mümkündür.

26.Cihazın kullanımı sürecinde akut reaksiyon ortaya çıkabilir mi?

Bu cihaz "içeriden dışarıya" prensibine göre organizmayı düzenlemektedir. Biyoenerji masaj cihazını kullandıktan sonra akut reaksiyon ortaya çıkarsa endişelenmeyin, bu sadece organizmada aktif iyileşme sürecinin başladığı anlamına gelmektedir. Akut reaksiyon genellikle 2-3 seanslık kullanım sonrasında, bazen de daha geç ortaya çıkabilmektedir. Bu reaksiyonların rahatsızlık verdiği bakılmaksızın, iyileşmede ilk adım olduğunu unutmayın. Biyoenerji masaj cihazını kullanmaktan korkmayın, bu

reaksiyonlar genellikle 3-15 gün sonra (Bazen daha geç) derece derece azalacak ve bitecektir. Bunlar derece derece kaybolduktan sonra organizmanın genel durumu iyileşecektir.

27.Akut reaksiyon ne demek?

Akut reaksiyon (Geleneksel Çin Tıbbına göre organizmanın durumunun iyileşmesine stres reaksiyonu mani olabilir)-meridyenlerin serbest kalması, chi enerjisinin yenilenmesi, toksinlerin hızla atılmasıdır ve bu da biyoenerji masaj cihazının fizyoterapi etkisi sayesinde elde edilen bir durumdur.Chi enerjisi ve kanın organizmada serbestçe dolaşımı sırasında toksinler hızla atılmakta,besinlerin sindirilebilirliği artmakta, bağışıklık sistemi ve organizmanın kendi kendini yenileyebilme yeteneği güçlenmektedir.Cihazın kullanımı sürecinde güç ve enerjide bir artış hissedilmektedir;aktif detoksifikasyon sırasında tuvalet ihtiyacı artabilir; meridyenlerin serbest kalması sırasında ağrı ve acı hissi olabilir; organizmanın kendi kendini yenilemesi sırasında yorgunluk ve uykusuzluk ortaya çıkabilir.

28.En yaygın akut reaksiyonlar hangileridir?

Akut reaksiyonlar doğrudan organizmanın genel durumu ile yani yaş, sağlık durumu ve diğer etkenlerle bağlantılıdır. Buna bağlı olarak çeşitli şu reaksiyonlar oluşabilir:

- 1.Aşırı yorgunluk, uykusuzluk,midede gaz birikmesi-kanda incelme, fazla yağın,kolesterolün, kimyasal maddelerin, ilaç kalıntılarının atılması.
- 2.Vücutta ateş hissi, yüksek ateş-organizmada bağışıklık sistemi aktif olarak düzenlenmektedir.
- 3.Kabızlık-Kalın bağırsak fonksiyonlarında değişiklik
- 4.İshal-İnce bağırsak fonksiyonlarında değişiklik veya biriken toksinlerin atılması
- 5.Akut ishal-biriken suyun bağırsaklardan atılması
- 6.Uykusuzluk veya uyku kalitesinin artması,sersemlik ve yorgunluk hissini olmaması-sinirsel gerilimin kalkması.
- 7.Tüm vücutta yaralar, abseler,kızarıklıklar,döküntüler,kaşıntılar-organizma kandaki toksinleri atmaktadır.
- 8.Ağız ve boğazda kuruluk, dudak çatlakları, “karaciğer ısı” sendromu (Geleneksel Çin Tıbbı)- karaciğerde çok sayıda toksin, karaciğer üzerindeki yükün keskin şekilde artması.
- 9.Farmakolojik preparatların sürekli kullanılması neticesinde ağızda devamlı yara ve boğazda ağrı-karaciğer ve kanda biriken ilaçların kimyasal maddelerinin atılması.
- 10.Göz yaşları-Toksinleri atma ve karaciğeri yenileme reaksiyonu
- 11.Baş dönmesi, baş ağrıları-Beynin kan damarlarındaki fazla yağların ve kolesterolün çözülmesi, stabil olmayan kan basıncına reaksiyon.

12.Hipertonus-Bağışıklık hücrelerinin aktivizasyonu

13.Sersemlik-Fiziksel fonksiyonların bozulması veya hastalık durumu. Organizma toksinleri atma sürecinde bulunmaktadır, bunun içinde uyku sırasında üretilen çok miktarda chi enerjisi ve kan harcamaktadır.

14.Ayakta mantar hastalığı, idrarda protein- Patojen soğuk* faktörünün mideden çıkması.

15.Karında şişkinlik,dışkıda kan, kabızlık,katran renginde dışkı-toksinlerin kalın bağırsaktan atılması, yenilenme reaksiyonu.

16.Baş dönmesi,kulak bölgesinde ödem-kalın bağırsaktan toksinlerin atılması, kalbin yenilenme reaksiyonu

17.Kan basıncında yükselme-damar duvarlarının yenilenmesi,plakların çözünmesine reaksiyon.

18.Açlık hissi-Organizmanın beslenme süreçlerinin düzenlenmesi.

19.Hoş olmayan ayak kokusu, hoş olmayan ağız kokusu-Organizmanın aktif detoksifikasyonu sırasında bakteri sayısından artış.

20.Saç dökülmesi-Saç köklerinin yenilenmesinin uyarılması,eski zarar görmüş saç kökleri yerine yenilerinin gelmesi.

21.Döküntü (İsilik)- Patojen *nem faktörünün atılması, suda çözünen toksinlerin atılması.

Geleneksel Çin Tıbbına göre organizmanın durumuna dış ortam faktörleri olan rüzgar, sıcak,ısı, nem, kuruluk ve açlık etki edebilir.Organizmanın yaşam enerjisi düştüğünde (Koruyucu chi) bu etkenler organizmaya nüfus ederek ve patolojiye neden olarak patojen karakter taşıyabilir.

29. Akut reaksiyon halinde ne yapılması gereklidir?

1.Eğer sağlıklı bir insansanız, işlem sırasında rahatsızlık duymayacaksınız ve organizma hoş olmayan reaksiyonlar vermeyecektir,cihazı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önemli olmayan akut reaksiyonlar birkaç seans sonrasında yok olacaktır.

2.Akut semptomların ciddi olması durumunda, işlem süresinin büyük ölçüde azaltılması gereklidir,akut semptomlar kaybolduktan sonra seans süresini standartlara uygun şekilde derece derece arttırınız. Akut reaksiyonun çok ciddi olması durumunda (Özellikler yaşlılarda) 1-2 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

3.Akut reaksiyonların uzun süre devam etmemesi halinde,organizmada çeşitli gizli semptomsuz hastalıkların önlenmesi amacıyla bir uzmanın planlı olarak muayenesi gerekmektedir.

30.Biyoenerji masaj cihazını kullandıktan ne kadar zaman sonra akut reaksiyon ortaya çıkabilir?

Akut reaksiyonlar bireysel olarak ortaya çıkmaktadır. Anlattığımız gibi bu organizmanın durumu, yaş ve diğer faktörlerle alakalıdır, reaksiyon zamanı da kişiye bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

1.Sağlıklı kişilerde akut reaksiyonlar çok hafiftir,uyku esnasında meydana gelmektedir ya da tamamıyla hissedilmemektedir.

2.Bazı kişilerde akut reaksiyonlar doğrudan cihazın kullanımı sırasında ortaya çıkmaktadır.

3.Az sayıda insanda reaksiyonlar 2-3 gün sonra ya da 10 gün geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır, Akut reaksiyonlar genellikle ortaya çıkışından 1-2 gün sonra geçmektedir. Bazı durumlarda 7-10 gün gereklidir.

4.Yaşlı veya sağlık durumu iyi olmayan kişilerde akut reaksiyonlar daha uzun sürmekte ve daha ciddi olup tekrarlamaktadır.

31.Akut reaksiyonlar sürekli olabilir mi?

Reaksiyonlar devam edebilir veya çok ciddi ortaya çıkabilir, ya da hafif derecede olabilir. Organizmanın düzene girmesi ve akut reaksiyonların kaybolması için bazılarında iki gün yeterlidir, ancak reaksiyonların uzun sürdüğü ve tekrarladığı durumlar olmaktadır.

32.Biyoenerji masaj cihazının kullanımı sürecinde bol su alınması niçin tavsiye edilmektedir?

Biyoenerji masaj cihazının kullanımı sırasında metabolizmanın hızlanması, hücrelerin daha fazla miktarda su harcaması nedeniyle toksinlerin bol su alınarak yani günde 2,5-3 litre su ile atılması tavsiye edilmektedir.(En iyisi biyoaktif su içmektir).

33.Biyoenerji masajı sonrası için uygun süre ne kadardır?

Genellikle biyoenerji masajı günde 1-2 kez uygulanmaktadır, tavsiye edilen işlem süresi 30-60 dakikadır.Cihazın kısa zaman aralıklarıyla kullanılmaya başlanması , yaş ve organizma durumu dikkate alınarak işlem süresinin derece derece artırılması gerekmektedir. Kişinin yaşı ne kadar fazla ve organizmasının durumu zayıf ise, işlem süresi o kadar kısa tutulmalıdır.

34. Biyoenerji masaj cihazının günün hangi döneminde ve hangi koşullarda kullanmak en iyisidir?

Organizmayı düzenlemek için en iyi zaman sabah 8 öğlen 12 ve günün ikinci yarısı saat 14 akşam 21 arasındadır.Cihazın daha geç saatlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.Biyoenerji masajı seansları için tavsiye edilen sıcaklık koşulları azami %80 hava neminde 0-40 derece arasındadır.

35.Biyoeenerji masaj cihazını uzun zaman kullanmak mümkün mü?

Biyoeenerji masaj cihazının 7 gün boyunca kullanılması mümkün, sonrasında 1 gün ara verilip 15 gün boyunca tekrar kullanılması mümkündür.Daha sonra tekrar 3-5 gün ara verilmesi gereklidir.Bu şekilde derece derece 30 günlük düzenli masaj kurunu tamamlamış olacaksınız.

36.İşlem sürecinde baş dönmesi ve kalp çarpıntısı ortaya çıkması halinde ne yapılması gereklidir?

Kural olarak bu reaksiyonlar yüksek kan basıncı ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda derhal cihazın kullanımına son vermek, daha fazla dinlenmek, vücudu sıcak tutmak, ballı veya zencefilli sıcak su içmek gereklidir.

37.Fizyoterapi işlemleri sırasında kaşıntı,ağrı,uyuşukluk,hafif ağrı hissi ortaya çıkıyor. Bu normal midir?

Bu meridyenlerin serbest kalmasına verilen bir reaksiyon, endişe etmenize gerek yok, cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

38.Cihazın bakımı nasıl yapılıyor?

1.Kullandıktan sonra cihazın ağıdan bağlantısını kesiniz, uzun süre elektriğe bağlı kalmamalı.

2.Kabloyu ve tamamlayıcı ürünleri toplayın, cihazın dış panelini kurulayın, temiz ve kuru tutun.

3.Mekanik zararlardan kaçının.

4.Cihazın doğrudan güneş ışınlarıyla temasından kaçının.

5.Korozyona karşı suyla temasından kaçının.

6.Cihazı kendiniz sökmeyin.

39.Cihazın her gün ne kadar süre ile kullanılması mümkün?

Cihazı uzun süre kullanmak mümkün.Maksimum süreyle kullanabilmek için işlem aralarında elektrik bağlantısını kesmeniz gereklidir.

40.Cihazın arızalanması halinde hangi önlemlerin alınması gereklidir?

Destek hizmetlerinin personeliyle irtibata geçiniz, arızaları önlemek için cihazı sökmeyi denemeyiniz.

41.Biyoeenerji masaj cihazının satış sonrası hizmetleri neleri kapsamaktadır?

Verilen garanti süresi satın alındığı andan itibaren bir yıldır, cihazın tamiri veya değişimi fabrika arızaları halinde yapılmaktadır. İlk üç yıl içinde ilave ücret ödeyerek cihazın tamirini ve değişimini yapmak mümkündür. Garanti taahhüdü kullanıcının

hatası ya da cihazın bağımsız tamirinden (Açılması) doğan arızaları kapsamamaktadır.

42.Biyoenerji masaj cihazını kullanarak nasıl bir etki elde edilmesi mümkün ve çeşitli el çalışmaları yöntemleri yardımıyla vücuda etkisi ne şekildedir?

- 1.Tarama: Enerji kanallarının temizlenmesi,meridyenlerdeki tıkanmanın ortadan kaldırılması, kan dolaşımının aktif hale getirilmesi.
2. “Avuç içi ile itme hareketi”-Chi enerjisi ve kanın düzenlenmesi, meridyenlerin temizlenmesi.
- 3.Titreşim-Kaşların gevşetilmesi ve adezyonların ortadan kalkması; taş oluşumunda, bel ve kalça ağrılarında, omuz eklem ağrılarında etkilidir.
- 4.Sürtünme-Kasların gevşetilmesi, chi enerjisi ve kan geçişinin lokal olarak iyileşmesi.
- 5.Karınçalanma-Anestezi etkisi.
- 6.Avuç içiyle masaj hareketi-Karında şişkinlik ve hazımsızlık halinde, chi enerjisi ve kanın tıkanması durumunda, eklem ağrıları ve kaz spazmlarında, tıkanıklık ve şişkinlik durumunda etkilidir.
- 7.Baskı-Yin-Yang dengesinin düzenlenmesi, spazmların giderilmesi, “soğuk ve rüzgarın” giderilmesi.
- 8.Çift karınçalanma-Meridyenlerin temizlenmesi ve aktif hale getirilmesi, patojen faktörlerin ortadan kaldırılması. Eklem ağrılarında farkedilir şekilde etki (Karpal,dirsek kemiği,diz etkisi)
- 9.Sızlama-Meridyenlerin temizlenmesi, iç ve dış düzenleme, kasların gevşemesi, spazmların ortadan kalkması.
- 10.Bükme-Meridyenlerin aktif hale gelmesi, eklemlerin yağlanması, ateşin, ağrı hissini, ayak ve el parmaklarındaki eklem şişmelerinin ortadan kaldırılması, eklemlerin eğilmesi ve bükülmesi sırasında rahatsızlık hissini ortadan kaldırılması.
- 11.Tendonların yumuşaması- Kasların gevşemesi, tıkanıklıkların ortadan kaldırılması,kas tonusunun ve elastikiyetinin artması, üst ve alt ekstremitte, sırt ve karın, büyük göğüs ve boyun kası bölgelerine etki için sıklıkla kullanılmaktadır.
- 12.Beş meridyenin ayrı ayrı çalıştırılması:Chi ve kan uyumu, tıkanmaların ortadan kaldırılması, yaşam tonusunun arttırılması. Baş dönmelerinde ve baş ağrılarında, görme bozukluğunda ve kulaklarda uğultuda etkilidir.
- 13.Meridyenler boyunca dört ekstremitenin çalıştırılması:Chi ve kan uyumu, meridyenlerin aktif hale getirilmesi,periferik kan dolaşımının iyileşmesi
- 14.Etki yoğunluğunun düzenlenmesi:Isınma ve meridyenlerin geçirgenliğinin iyileştirilmesi, mikro sirkülasyonun iyileşmesi. Genellikle miyop,presbiyopi, rinit,

faranjit, kulaklarda çınlama,baş ağrılarında kullanılmaktadır. Kozmetik etkisi, üst ve alt Ekstremita bölgesinde eklemlerin durumunun ve kan dolaşımının düzenlenmesi.

15.Yenilenme ve temizlenme:Kolay etki, düşük yoğunluk, kısa zaman, saat oku yönünde- temizlenme; tersine: aktif etki, yüksek yoğunluk,uzun zaman, saat oku tersinde –yenilenme. İşlem sürecinde yenilenme ve temizlenme dengesi mümkündür.

43.Fohow biyoenerji masaj cihazıyla çalışmada yeni başlayanların hangi temel prensipleri bilmesi gereklidir?

Süre:Hareket ve uygulanan gücün doğru orantıda olması

Güç: Baskı ve yoğunluk gücünün desteklenmesi

Yumuşaklık:İşlem sırasında esnek ve serbest hareketler.

Nüfuz derecesi:Etki sadece cildin yüzeyi üzerinde değil, kaslar, kemikler ve iç organlar üzerine olmalıdır.(İlimli, ancak hissedilebilir derecede.

44. Fohow Biyoenerji masaj cihazı yardımıyla sırt bölgesine etki esnasında sıradaki adımları söyler misiniz?

Birinci adım: Masaj jeli uygulaması.

Koltuk altı bölgesi dâhil jeli eşit şekilde sırtın tüm yüzeyine dağıtınız. Bu sırada sırtta gevşeme olması gerekmektedir.

İkinci adım: Du-may arka orta meridyende çalışma

Hareket Da-chiu noktasından başlamakta ve Juan-Tiao noktasında bitmektedir. Juan-Tiao noktasına doğru kademe kademe avuç içi ile itme hareketleri yapmaya başlıyoruz, Juan-Tyao noktasında 5-10 saniye kalıyoruz, bu masaj hareketini kadınlar için 8 kez, erkekler için 9 kez tekrarlıyoruz. Yoğunluğu 14-18 birim aralığında belirliyoruz. (Hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak ayarlanabilir).

Üçüncü adım: Mesane meridyeni üzerinde çalışma

Hareket Da-chiu noktasından iki taraftan başlamakta ve ba-liao noktasında bitmektedir. İki başparmağımızı chia-chi noktasında uzatıyoruz, beş parmak sırt bölgesi üzerinden aşağıya hareket ettiriyor, sonra avuç içini serbestçe kaldırıp, tekrar kademe kademe ba-liao noktası bölgesine gidiyor ve 5-10 saniye orada bekliyoruz, bu masaj hareketini kadınlar için 8 kez, erkekler için 9 kez tekrarlıyoruz. Yoğunluğu 12-16 birim aralığında belirliyoruz. (Hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak ayarlanabilir).

Dördüncü adım: Lo-May Kollaterali üzerinde çalışma

Başlangıçta sol, daha sonra sağ tarafı çalıştırıyoruz. Bir elimizi Chan-Qiang noktasına yerleştiriyoruz, diğer elimizi Da-Chiu noktasından başlayarak toplama hareketiyle supraspinatus kası üzerinden kol altına doğru hareket ettiriyor ve 5-10 saniye chi-chuan bölgesi noktasında bırakıyoruz, daha sonra

Lo-May kollektaralleri üzerinden aşağıya doğru hareketi devam ettiriyoruz. Bu esnada avuç içi ve cildin yüzeyi arasında boşluk olmamasına dikkat ediyoruz, hareketi Day-May çevreleyici meridyen bölgesinde bitiriyoruz. Çevreleyici Day-May meridyeni üzerinde 9 kez çalışıyoruz, sonra avuç içini tekrar Juan-Tiao noktasına doğru hareket ettiriyor ve 5-10 saniye kadar orada tutuyoruz. Bu döngüyü 3 kez tekrarlıyor, sonra diğer taraf üzerinde çalışmaya başlıyoruz.

Yoğunluğu 12-16 birim arasında belirliyoruz (Hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak ayarlanabilir).

Beşinci adım: Nokta üzerinde sabit etki

Bir elimizi Chan-Qiang noktasına, diğerini Da-Chiu noktasına yerleştiriyoruz, bu esnada yoğunluğun kademe kademe artması gerekmektedir. (Hastanın adaptasyonu ölçüsünde)Sınıra ulaşıldığında 1 dakika ara verilmesi, daha sonra mutlaka yoğunluğun en baştaki düzeye düşürülmesi gerekmektedir.

Altıncı adım: Çevreleyici Day-May meridyeni üzerine sabit etki

İki elimizi Min-Men noktası bölgesine yerleştiriyor ve çevreleyici Day-May meridyenine doğru sıkıca bastırıyoruz, bel bölgesinde ağrı hissi oluşana kadar kademe kademe yoğunluğu arttırıyoruz, sonrasında 1 dakika boyunca ara veriyor ve bu döngüyü 2 kez tekrar ediyoruz.

Yedinci adım: Cheng-Fu noktası üzerine sabit etki

İki elimizi sıkıca Cheng-Fu noktası üzerine bitişik şekilde yerleştiriyoruz, hastanın hassasiyet sınırına ulaşıncaya kadar yoğunluğu kademe kademe arttırıyoruz, sonra 1-2 dakika ara veriyoruz.


Sekizinci adım: Patojen "Rüzgar" faktörünün noktalardan çıkartılması


Chien-Ching noktasından başlayarak on parmağımızla Chi-Chuan, Bi-Nao, Chu-Chi, Shou-San-Li, Nei-Kuan, Wai-Kuan, Shen-Men, Tai-Yuan, Hae-Gu, Hou-Si noktalarına geçiyoruz. Bu işlem 5-10 dakikamızı alıyor. Yoğunluk kontrolü: Chu-Chi noktasından başlayarak ve bu sırada parmaklarla baskıyı düşürürsek yoğunluğu arttırmak mümkündür.

Dokuzuncu adım: Enerji balsamı uygulaması

Temel gereksinimler: Enerji balsamının özellikle Da-Chiu, Ba-Iyao, A-Shisyue noktaları üzerinde sırtın tüm yüzeyine uygulanması gerekmektedir. Sonra cildin stretch film ile sarılması gerekmektedir.

İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Hastanın aşırı soğumamasına dikkat ediniz, gerekli yardımcı ürünü sağlayınız, iyileşme öncesi ortaya çıkabilecek reaksiyonlar hakkında hastayı aydınlatınız, bu reaksiyonların normal olduğunu, korkulması gereken bir durum olmadığını açıklayınız.

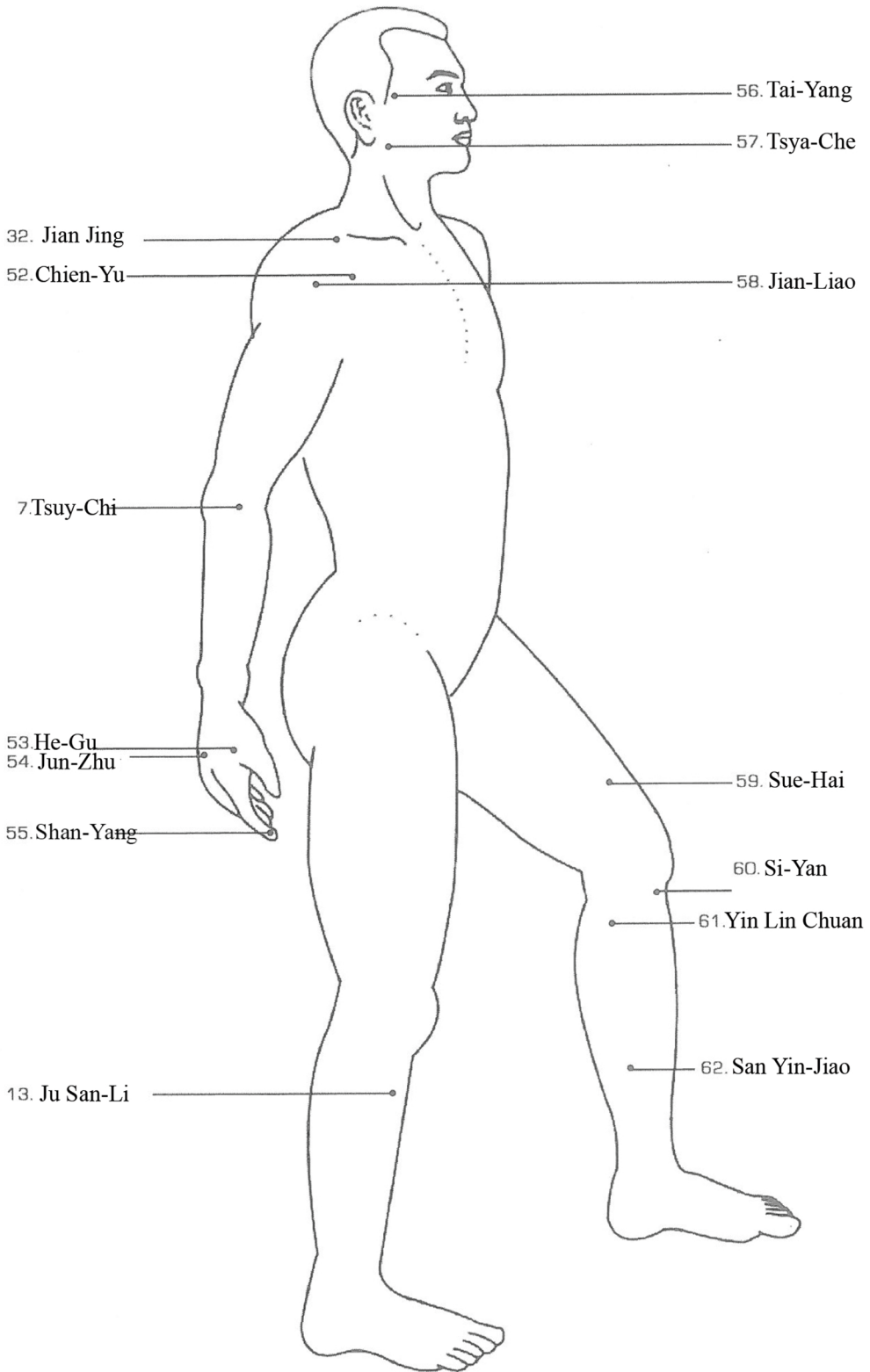

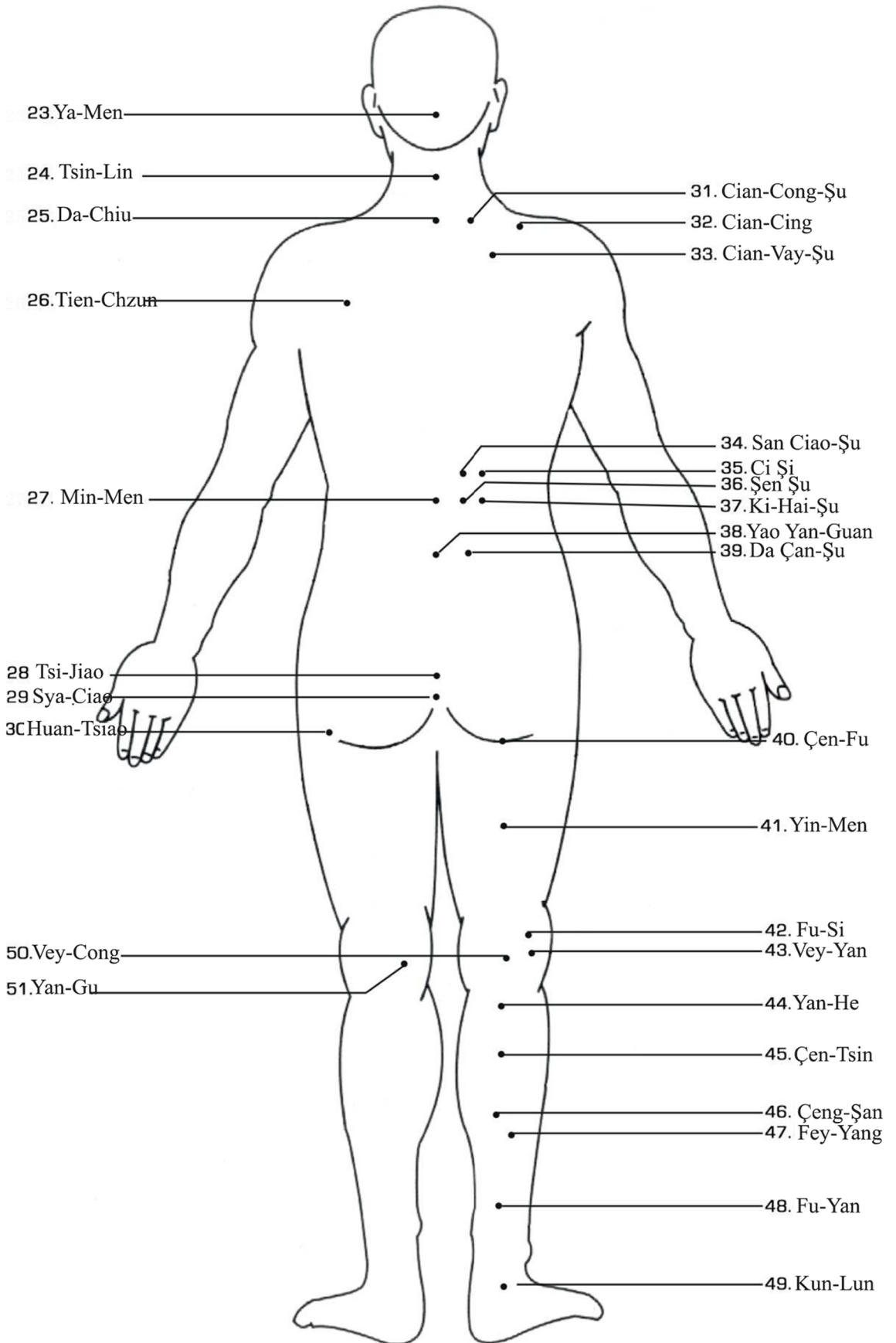

1. Hastayı, vücut ısısını düşürmemesi ve tedaviden sonraki 2 saat içinde duş almaması için uyarın.
2. Hastayı, tedaviden sonraki 2 saat içinde demli çay içmemesi için uyarın. Ona sıcak su veya şekerli zencefil çayı tavsiye edin.
3. Hastanın vücudunun durumuna bağlı olarak, ona uygun sağlık ürünlerini seçin.
4. Olası yan etkilerin yanı sıra bu etkileri bertaraf etme yöntemlerini de bildirin.

45. Cihazı vücuda uygularken nelere dikkat etmek gerekir?

1. Teşhisi tam koymak gerekir. (Asla rastgele kullanımı tercih etmeyin).
2. İyi konsantre olmak gerekir (ellerin hareketi net ve düzgün olmalıdır, verimlilik buna bağlıdır. Değişik tekniklere karşı hastanın reaksiyonlarını ve etkinin gücünü takip edin.)
3. Bir tekniğin seçilmesi gereklidir (teknik, hastalığa ve etki alanına bağlı olarak seçilir).
4. Yoğunluğunun (sıkma gücü, etki alanı, temas alanı, sıkma metodu, tedavi süresi) seçilmesi gerekir.
5. Süreç düzenli olmak zorunda (tedavi yukarıdan aşağıya, önce sola, sonra vücudun sağ tarafına, önden arkaya, ileri geri, dışarıdan içeriye doğru gerçekleştirilmelidir).
6. En uygun tedavi süresini seçmek gerekir (genellikle 30 ila 45 dakika arası).
7. Hijyene dikkat edin (eldivenleri, çarşafı, havluları temiz tutun, giysileri ve müşterinin eşyalarını temiz tutun).

46. Biyoenerji masaj cihazının terapideki avantajları nelerdir?

Biyoenerji masaj cihazının en büyük avantajı aküpunktür ve yakma(dağlama), guaşa masajı, tuina masaj tekniği, vakum terapisi, aküpunktür iğnesi kullanımı ile yapılan tedaviler ve diğer teknikleri tek bir alette birleştirmesidir. Bu, Yang-Sheng'in geleneksel Çin yöntemleri ve modern sağlık destek usulleri yardımıyla vücuda yapılan kapsamlı bir tedavi yöntemidir:

1. Teknolojiler: Geleneksel Çin tıbbi teorisinin ve modern fizyoterapi yaklaşımlarının uyumlu bir kombinasyonudur.
2. Basitlik: eğitim kolaylığı, uzun masaj uygulaması gerektirmez, çalışma kolaylığı (cihazla çalışmayı öğrenmek için tam 2 gün yeterlidir).
3. Verimlilik: meridyenler üzerinde anlık etkisi, vücutta Qi dolaşımının serbest hareketinin etkinleştirilmesi, belirgin ve hızlı bir etki sağlar. ilk uygulamadan itibaren % 70 den fazla sonuç alınmıştır.

4. Kapsamlı etki: Yin-Yang iç organlarının dengesinin düzenlenmesi, enerji Qi dolaşımı dengesi sağlanır. Hastalıkların önlenmesi, kozmetik etki.
5. Güvenlik: inanılmaz bir teknik, vücut üzerinde güvenli ve kalıcı bir etkiye sahip tamamen yeni bir cihaz olup, kurtarma için rahat ve ağrısız bir tedavi imkanı sunar.
6. Ekonomik fayda: uygun fiyat.
7. Rahatlık: evinizde ki kişisel doktor ve güzellik uzmanı.

47. Biyoenerji masaj cihazı Fohow kullanımı tıbbi tedavilerin yerini alabilir mi?

Biyoenerji masaj cihazı Yang Sheng'in sağlık destek uygulamasıdır, tıbbi bir cihaz değildir ve tıbbi ilaçların tamamıyla alternatifi olamaz. İlaç kullanan hastalar, ilaç bileşenlerinin daha iyi uygulanabilirliği için biyoenerji masaj cihazı kullanabilirler. İyileşmeye yönünde reaksiyon alındıktan sonra ilaç sayısını azaltmak mümkündür, bunun için doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

48. Cihaz bağımlılık yapar mı?

Biyoenerji masaj cihazının bağımlılık yapma gibi yan etkisi yoktur. Sağlığınız konusunda istikrarlı bir sonuç elde etmek için cihazı uzun süre kullanmanız önerilir.

49. Fohow biyoenerji masaj cihazını kullanırken hangi yöntemi seçmeliyim?

Bu hastanın bireysel durumuna, hastalığa, kişinin aldığı ilaçlara, yaşına bağlıdır. Biyoenerji masaj cihazı iyileşmeyi destekler, ancak her vücudun kendine özgü bir iyileşme hızı vardır bu yüzden cihaz kullanımında kesin bir süre belirlenemez. Cihazın uzun süreli kullanımı, fiziksel durumda önemli gelişmeler sağlar.

50. Biyoenerji masaj cihazı kim için uygundur?

Hastalıktan önce insanlar, vücudun yüksek asitliği, soğuk ve nem gibi patojenik faktörlerin etkisi altındadırlar.

51. Vücudun herhangi bir bölümüne masaj yapmak mümkün mü?

Kullanım sakıncasının bulunduğu yerler haricinde, vücudun tüm kısımları için biyoenerji masaj cihazını kullanabilirsiniz.

52. Biyoenerji masaj cihazı eklem hastalığına yardımcı olur mu?

Biyoenerji masaj cihazı Yang-Sheng'in sağlığı koruma yöntemidir, tıbbi bir cihaz değildir. Cihaz insan vücudundaki meridyenlerin anlık aktivasyonunu, Qi enerjisinin sirkülasyonunu normalleştirmeyi, bağıışıklığı güçlendirmeyi, organizmanın direncini artırmayı destekler, bu da birçok hastalığın tedavisinde hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunur.

53. Tedaviden sonra eklemlerdeki ağrı arttı. Bunun nedeni nedir?

Bunun nedeni, meridyenlerde Qi dolaşımının artmasıdır ve iyileşmeye normal bir yanıttır ve buda tedavinin etkinliğinin bir göstergesidir. Bu durumda, en iyi sonucu elde etmek için tedavinin seyrini sürdürmek gerekir.

54. Bir biyoenerji masaj cihazı sayesinde fazla kilolardan kurtulabilir miyim?

Cihazın kullanımı temel metabolizmayı hızlandırır ve cilt altı dokularının sıcaklığını artırır. Bu, yağlı dokunun yanmasını hızlandırır bu sayede vücut şeklinde düzelme meydana gelir.

55. Biyoenerji masaj cihazı sayesinde kozmetik etki elde etmek mümkün müdür?

Biyoenerji masaj cihazı kullanımı metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur ve vücudun cilt üzerinde yararlı etkilere sahip olan besinleri biriktirme yeteneğini artırır. Cilt sağlıklı bir görünüm kazanır, esnekliği artar, kırışıklıklar daha az fark edilir hale gelir.

56. Biyoenerji masaj cihazı kullanılması adet döngüsünde ve akıntının miktarında bir değişikliğe yol açar mı?

Bir kadının iç salgı fonksiyonunun bozulması durumunda, cihazın kullanılması adet döngüsünde ve adet miktarında değişikliklere neden olabilir. Bu iyileşmeden önce oluşan normal bir tepkidir. Bu durumda, biyoenerji masaj cihazını kullanmaya devam edilmesi tavsiye edilir.

57. Adet ağrılarına karşı biyoenerji masaj cihazı nasıl bir sonuç verir?

Bir biyoenerji masaj cihazı kullanılması vücut sıvılarının asit-baz dengesinin korunmasına yardımcı olur ve ayrıca parasempatik sinirleri harekete geçirir, iç salgılama sistemindeki hücrelerin aktivitesini artırır ve vücudun hormonal dengesini destekler.

Ayrıca, biyoenerji masaj cihazı meridyenleri temizlemeye, durgunluğu ortadan kaldırmaya ve ağrıdan kurtulmaya yardımcı olur. Biyoenerji masaj cihazı adet ağrılarını azaltan etkinliğine dair somut sonuçlar göstermektedir.

58. Biyoenerji masaj cihazı menopoza sendromunu hafifletmekte etkili midir?

Biyoenerji masaj cihazı kullanımı vücut sıvılarının asit-baz dengesinin korunmasına yardımcı olur, iç salgılama sistemindeki hücrelerin aktivitesini artırır, hormon düzeyini stabilize eder, iç salgılama sisteminin çalışmasını düzenler, bu da menopoza sendromun hafifletmesinde iyi bir sonuç verir.

59. Prostat hastalıklarını önlemek için biyoenerji masaj cihazı kullanılmasının faydası nedir?

Biyoenerji masaj cihazı kullanımı, vücut sıvılarının asit-baz dengesinin korunmasına yardımcı olur, hormon seviyesini stabilize eder, kan dolaşımını iyileştirir, bu da prostat hastalıklarının önlenmesinde iyi bir sonuç verir.

60. Biyoenerji masaj cihazı uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur mu?

Biyoenerji masaj cihazı uzun süreli kullanımı otonom sinir sisteminin çalışmasını normalleştirmeye yardımcı olur ve tüm iç organların dengesini düzenler, bu da uyku kalitesinde bir iyileşmeye yol açar.

61. Tedaviden sonra uykusuzluk arttı, neden kaynaklanabilir?

Bu, otonom sinir sisteminin normalleşmesine karşı bir tepkidir, bilindiği üzere bu insanlarda otonom sinir sisteminin işlevlerinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Tedaviye devam edilmesi önerilir ve kısa süre sonra uyku normale dönecektir.

62. Biyoenerji masaj cihazı ishal, kabızlık sonucu sık görülen mide ve bağırsak ağrılarında etkili midir?

Biyoenerji masaj cihazının uzun süreli kullanılması, ishal ve kabızlık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan bağırsak bakterisinin dengesini normalleştirmek için mide ve bağırsakların emilimini iyileştirmeye yardımcı olur.

63. Tedaviden sonra ishal ortaya çıktı. Sebebi nedir?

Bu sindirim sistemindeki birikmiş fazla toksinlerin temizlenmesinden dolayı ya da uzun bir rahatsızlık sonrasında mide ve bağırsak fonksiyonlarının normalleşmesine karşı bir tepkime olabilir.

64. Biyoenerji masaj cihazı hemoroit için etkili midir?

Biyoenerji masaj cihazı kullanımı bağırsak bakterilerinin dengesini normale döndürmek için mide ve bağırsaktaki kasılmaları ve sürekli yükselen karın içi basınç durumunu iyileştirerek hemoroit oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

65. Tedaviden sonra dışkıda meydana gelen kanın sebebi nedir?

Kan oluşum sebeplerine bakmak gerekir, özellikle siyah kan mide ya da on iki parmak bağırsağındaki problemlere, kırmızı kan kalın bağırsaktaki bozulma veya karaciğer fonksiyon problemlerine işaret eder. Dışkıda kan görüldüğünde, teşhis için hemen bir uzmana danışın.

66.Sık sık baş dönmesi ve baş ağrısına karşı biyoenerji masaj cihazının etkisi nedir?

Biyoenerji masaj cihazı otonom sinir sistemi bozukluklarından dolayı oluşan baş dönmesi ve baş ağrıları için etkilidir. Biyoenerji masaj cihazı kullanımı kafadan geçen meridyenleri temizlemeye, kan dolaşımını iyileştirmeye ve beyni oksijenle beslemeye yardımcı olur.

67.Biyoenerji masaj cihazı romatizmal hastalıklarda etkili midir?

Biyoenerji masaj cihazı etkili bir şekilde meridyenleri temizler ve Qi dolaşımını iyileştirir. Geleneksel Çin tıbbında Qi kan dolaşımına verilen addır. Kan dolaşımı romatizmayı giderir, bundan dolayı biyoenerji masaj cihazı romatizmal hastalıklarda iyi bir sonuç vermektedir.

68.Biyoenerji masaj cihazı, felç sonrası komplikasyonlar durumunda yardımcı olabilir mi?

Biyoenerji masaj cihazı, meridyenlerin dolaşımını iyileştirir, kanın durgunluğunu ortadan kaldırır ve vücudun enerjisini yeniler, kan dolaşımını iyileştirir, iç organların bozulmuş işlevlerinin dengesini geri düzenler. Tüm bunlar, felç sonrası komplikasyonlar durumunda sağlığın korunmasına yardımcı olur.

69.Biyoenerji masaj cihazı, yüz sinirleri hasarlarına karşı yardımcı olabilir mi?

Biyoenerji masaj cihazı sinir sisteminin düzenlenmesin de iyi bir etkiye sahiptir. Kullanımı yüz sinirleri hasarlarına karşı etkilidir.

70.Uyku sırasında eller ve ayaklar soğuyor, biyoenerji masaj cihazı bu problemi çözebilir mi?

Bu durumda, masajı kullanma çok etkilidir zira o, çevresel kan dolaşımını belirgin bir şekilde iyileştirir.

71.Kan basıncımı biyoenerji masaj cihazı ile azaltabilir miyim?

Biyoenerji masaj cihazı kan damarlarını temizler, kan dolaşımını iyileştirir ve kan durgunluğunu ortadan kaldırır, böylece kalp ve kan damarlarındaki yükü azaltır, bu sayede kan basıncını düşürmek için iyi bir etkiye sahiptir.

72.Tedaviden sonra baş dönmesi ve mide bulantısı olabilir mi?

Yüksek kolesterol, hipoglisemi ve yüksek tansiyondan rahatsız olan kişiler, tedaviden sonra baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayabilirler. Bu iyileşmeden önce normal bir tepkidir. Bu durumda, endişelenmeyin, daha fazla su içmek, uyku düzenini sağlamak, daha fazla taze meyve ve sebze beslenmeye dahil etmek ve tedavi sürecine devam etmek tavsiye edilir. Eğer belirtiler kötüleşirse, birkaç gün tedavilere ara verin.

73.Hipertansiyonu olan hastalarda, tedaviden sonra tansiyon yükselir, bunun nedeni nedir?

Hipertansiyonu olan bazı kişilerde tansiyon artışı veya basınç sıçramaları gözlemlenir, bu vücudun iyileşmeye karşı yaygın bir reaksiyondur. Daha fazla su içmek, uykuyu düzene sokmak ve daha fazla taze sebze ve meyve tüketmek tavsiye edilir. Tedaviye devam edebilirsiniz, ancak yoğunluğunu azaltmanız ve tedavinin süresini kısaltmanız gerekir. Eğer bu belirtiler şiddetlenirse, bir uzmana danışın.

74.Biyoenerji masaj cihazı kullanımı kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir mi?

Tedavi sırasında, metabolizmayı geliştirmeye, pankreas hücrelerin aktivitesini ve işlevselliğini artırmaya yardımcı olan meridyenler ve biyolojik aktif noktaları üzerinde bir etkisi vardır. Bu diyabetli bireylerin kan şekeri seviyelerini stabilize etmesine ve komplikasyonları önlemesine yardımcı olur. Nadir durumlarda, şeker seviyesi geçici olarak artabilir. Bu durum iyileşme esnasında meydana gelen reaksiyonlardan kaynaklanır. Tedavinin devam ettirilmesi, yoğunluğun azaltılması ve işlem süresinin kısaltılması, daha fazla su içilmesi, uyku düzeninin sağlanması, daha fazla taze sebze ve meyvenin tüketilmesi tavsiye edilir.

75.Tedaviden sonra şişlik olabilir mi?

Böbrek yetmezliği olan kişiler, tedaviden sonra kısa süreli bir şişlik yaşayabilirler, bu normal bir tepkidir.

76.Neden şiddetli hipertansiyonu olan insanlar biyoenerji masaj cihazını kullanamaz?

160'dan yüksek ve 120'den daha düşük bir kan basıncına sahip kişilerin biyoenerji masaj cihazı kullanılması önerilmez. Tedavi sadece yüksek nitelikli bir uzmanın gözetimi altında yapılmalıdır.

77.Tedaviden sonra deride kaşıntı ve dökülme meydana geldi. Sebebi nedir?

Bu, toksinlerin vücuttan atılmasına verdiği reaksiyondur. Karaciğer fonksiyonunun azalması ile, karaciğerde çok sayıda toksin, deri hastalıkları, uzun süreli hormonal ilaç kullanımı, ağır metal içeren kozmetik kullanımı, uzun süreli kimyasal preparat ve ilaç kullanımı, vücutta çok sayıda toksin birikmektedir. Bunların dışarı atılması deri kaşıntısı ve döküntü eşlik edebilir. Daha fazla su içmek, uykuyu düzene sokmak ve daha fazla taze sebze ve meyve tüketmek tavsiye edilir. Ancak, prosedürlere devam etmek mümkündür, fakat yoğunluğu azaltmak ve prosedür süresini kısaltmak gereklidir.

78.Tedaviden sonra, göğüs sıkışması ve kalp çarpıntısı hissi vardı. Sebebi nedir?

Bu reaksiyon kalp yetmezliği olan kişilerde görülür. Tedaviye birkaç gün ara vermeniz önerilir. Ciddi kalp ve akciğer bozuklukları olan kişiler biyoenerji masaj cihazını kullanmamalıdır.

79.Tedaviden sonra idrar renginde, kokusunda ve miktarında değişiklik oldu. Sebebi nedir?

Bu değişiklikler, böbreklerin fonksiyonlarının azalması, prostat veya idrar yolları rahatsızlıklarını gösterir. Daha fazla su içilmesi tavsiye edilir, tedaviye devam edilebilir ancak, süresi ve yoğunluğu azaltmak gerekir ve belirtiler kötüleşirse, ilgili bir uzmana danışmak gerekir.

80.Tedaviden sonra, aşırı bir yorgunluk, uyku hali, ağız kuruluğu ortaya çıkmaktadır. Sebebi nedir?

Bu reaksiyon, vücudunda yüksek asit bulunan kişilerde görülür. Endişelenmeyin, tedaviye devam edebilirsiniz.

81.Tedaviden sonra, deride kaşıntı, ağız kuruluğu, ağızda aft meydana gelmektedir. Bunun nedeni nedir?

Bu reaksiyonun nedeni karaciğer ve mide rahatsızlıkları olabilir. Bu sebep endişe nedeni değildir, daha fazla su içmek tavsiye edilir, tedavi devam ettirilebilir.

82.Düşük tansiyonu olan kişiler biyoenerji masaj cihazı kullanabilir mi?

Biyoenerji masaj cihazı kullanımı kalp fonksiyonlarını güçlendirir ve kalbin enerjisini yeniler, bu da düşük basınç altında olumlu bir sonuç verir. Hafif hipertansiyonu olan kişiler için, biyoenerji masaj cihaz kullanımı çok iyi bir sonuç vermektedir. Şiddetli formda ise, biyoenerji masaj cihazı önerilmez, tedavi sadece deneyimli bir uzman gözetiminde mümkündür.

83.Tedaviden sonra baş dönmesi ve gözlerde dalgalanmalar ortaya çıktı. Bunun nedeni nedir?

Bu reaksiyon düşük tansiyon ve düşük kan şekeri olan kişilerde kendini gösterir. Esmer şekerli zencefil çayı veya ballı su içmek, istirahat etmek tavsiye edilir.

84.Neden adet döneminde biyoenerji masaj cihazı kullanımı yasak?

Biyoenerji masaj kan dolaşımını iyileştirir, kan durgunluğunu ortadan kaldırır, bu nedenle adet sırasında kullanımı salgı miktarında artışa neden olabilir.

85.Biyoeenerji masaj cihazı kalp ve akciğerlerin ciddi patolojik rahatsızlıklarında neden kullanılmaz?

Ağır kalp ve akciğer patolojileri olan hastalarda kritik durumlardan kaçınmak için, tedavi sadece deneyimli bir hekimin gözetimi altında yapılmalıdır.

86.Cihaz soğuk algınlığı ve yüksek ateş halinde neden kullanılmamalıdır?

Soğuk algınlığı durumunda cihazın kullanımı tedavi maksadıyla kullanılması doğru değildir. Çünkü vücut sıcaklığının artmasına neden olabilir.

87.Onkoloji hastalıkları için biyoeenerji masaj cihazı kullanmak mümkün mü?

Kanserin aktif evresinde biyoeenerji masaj cihazını kullanamazsınız. Cerrahi müdahalelerden, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden sonra ve vücutta denge tam olarak sağlandığında bağıışıklığı arttırmak için cihazı kullanabilirsiniz.

88. Yağ bezesi olması durumunda biyoeenerji masaj cihazı kullanılabilir mi?

Kullanılabilir. Biyoeenerji masaj cihazının enerji kremi ile birlikte kullanımı kan dolaşımını aktive ettiği, tıkanıklığı ortadan kaldırdığı ve arındırma sürecini başlattığı için iyi bir sonuç vermektedir.

89.Vücut kasları seans sırasında neden istem dışı kasılır?

Çünkü fizyoterapi seansı sırasında meridyen ve kanal noktalarına doğrudan yapılan eldiven teması tam bir etki oluşturur. buda vücutta ani meridyen temizlenmesini ve en başta damar ve kanallardaki Qı nin kalitesini yükseltir. Eğer Qi hareket ederse, o zaman kan da hareket eder. Enerji kanallarının hızlı bir şekilde temizlenmesi sürecinde istemsiz kas kasılmaları oluşabilir. Bu refleks görünümlü bir reaksiyondur, normaldir, cihazı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

90.Biyonerji masaj cihazı eldivenleri ile guaşa masajı yapılırken kızarıklık hızlı yok olurken geleneksel guaşa masajında neden daha yavaş yok oluyor?

Biyoeenerji masaj cihazı kullanarak guaşa masajı yaparken, dışa doğru kızarıklık cildin arındırılması sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Geleneksel guaşa masajı tekniğinde ustalaşmak zordur, bu nedenle yanlış teknik kullanıldığında, uzun bir süre gitmeyen deri altı kanamalarına neden olmak mümkündür.

91.Bel bölgesinde tedavi sırasında hangi sebeplerle karıncalanma hissi oluşur?

Bel bölgesinde bölgesindeki kollateraller cildin yüzeyine daha yakındır, bu yüzden çalıştıklarında bir karıncalanma hissi oluşur. Bu, normal bir reaksiyon olarak kabul edilir. Cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

92.Müşteri tabanını genişletmek için biyoenerji masaj cihazı nasıl kullanılır?

Biyoenerji masaj cihazı ortaklar izlenimler", "duygular", "eğitim" ve "hizmet" gibi pazarlama konularını birleştirmekle müşteri tabanını genişletme problemini çözebilir. Bu yaklaşım piyasaının gelişimini kolaylaştırır, olası bir müşteriye olan mesafeyi azaltmak, onlarla bir güven ilişkisi kurmak, kaliteli müşteri sayısını arttırmak ve onların çevreleri üzerinden daha fazla müşteri çekmek. Örnek davet şekli:

Merhaba! Daha önce *** bölgesinde bir rahatsızlık duyduğunuzu belirtmişsiniz. Yakın zamanda, kişisel olarak biyoenerji masaj cihazı ile bir tedavi süreci yaşadım. Çok iyi bir sonuç aldım ve hemen sizi hatırladım. Masaj işlemi gerçekleştiren Çinli Yang-Sheng uzmanları ile **/**/** tarihinde bir toplantı olacaktır. İki kişilik yerleri kaldı, sizinle beraber gitmeyi teklif ediyorum. Kesinlikle size yardımcı olacaktır.

93.Müşteri tabanı nasıl genişletilir?

Etkin bir davet tekniği 8 adımdan oluşur:

1. İsimlerin listesini derlemek
2. Liste ile çalışma (planlama, kategorize etme ...)
3. Davet (potansiyel müşterinin ihtiyaçlarına göre)
4. Masajın geçişi
5. İlerleme (tedavi sonuçları, ABC den güç alma)
6. Tedavi etme planı
7. Takip etme

8.Kopyaları çoğaltma

Etkili iletişim tekniğinde önemli noktalar:

- 1) Güven 2) Tolerans

Teknik: 1) müşteri hizmetleri ve insaniyet 2) zaman ve fırsat

94.Fohow Masaj Jeli Nedir?

Masaj Fohow jeli, Fohow Research Institute tarafından özel olarak Fohow Biyoenerji masaj cihazı ile kullanılmak üzere geliştirilmiş saf bir doğal bitki özütüdür.

95.Masaj jeli güvenli midir?

Kesinlikle güvenlidir. Jel, modern kuantum teknolojisinin yardımıyla özüt hale getirilen doğal bitki bileşenlerinden oluşur. Jel zararlı kimyasal katkıları içermez.

96.Masaj jeli ne gibi etkilere sahiptir?

Cildi besleyici maddelerle içerir, nemlendirir, yumuşatır ve yüksek iletkenlik sağlar.

97.Diğer masaj jellerini kullanabilir miyim?

Birçok masaj jeli var, ancak onların güvenliğini garanti edemeyiz. Biyoenerji masaj cihazı Fohow ile birlikte gelen özel bir masaj jeli kullanmanızı öneririz.

98.Seans sırasında neden masaj jeli kullanmalıyız?

1. Biyoenerjinin ana fonksiyonları - kandaki toksinlerin atılması, enerji kanallarının temizlenmesi, kan dolaşımının aktivasyonu ve metabolizmanın uyarılmasıdır. Masaj jeli geleneksel Çin tıbbi bitkilerini içerir, romatizma ağrılarını etkili bir şekilde azaltır ve hızlı bir ağrı kesici etkisine sahiptir. Biyoenerji masaj cihazı ve masaj jelinin birlikte uygulanması, enerji kanallarının temizlenmesini ve ağrı kesici etkisini artırır.

2. Meridyenleri serbest bırakma sürecinde, beden çok miktarda enerji tüketir. Masaj jeli önemli enerji ve kan elementlerinin yenilenmesi için içerik bakımından zengindir. O hücresel enerjiyi yeniler ve antioksidan etkiye sahiptir, vücudun iyileşmesine katkıda bulunur. Jel ve cihazın birlikte kullanımı, yenilenme işlemini hızlandırır.

99.Fohow Enerji Balsamı Nedir?

Enerji Fohow balsamı, uzun tıp pratiği sırasında akademisyen Tan Yu Zhi'nin bileşimine göre yaratılan bir üründür. Geleneksel Çin tıbbının şu değerli bitki özlerini içerir: Sibiryaya ginseng, ejaomma euomma, Sichuan ligusticum, Çin arkaik, Çin tarçını, sarı zencefil ve bir düzineden fazla diğer otlar mevcuttur. Profesör Zhang Jia Heng hızlı bir şekilde vücuda giren ve hastalığın kaynağına ulaşan balsam bileşkesine deri altı emilimini sağlayan yenilikçi kuantom teknolojisini buldu.

100.Fohow Enerji Balsamın geliştiricisi kimdir?

Fohow Enerji Balsamı, uzun tıp pratiği sırasında akademisyen Tan Yu Zhi'nin bileşimine göre Profesör Zhang Jia Heng'nin ileri teknolojilerin uygulanması sonucunda elde edilen bitki özlerinin kullanılmasıyla oluşturulmuş bir üründür.

101.Fohow Enerji Balsamı hangi etkilere sahiptir?

1. Yönlendirilmiş ısınma eylemi.
2. Vücuttaki nemin patojenik etkisinin ortadan kaldırılması, vücudun direncini artırır.
3. Cilt gençleştirme, tonik etkisi.
4. Zayıflama
5. Vücut enerjisinin yenilenmesi.
6. Kasların aktivasyonu, enerji kanallarının serbest bırakılması.

102. Fohow Enerji Balsamı neden vücudu enerji ile doldurur?

Fohow Enerji Balsamı dünyaca ünlü kuruluşların ve kliniklerin lisans denetimlerinden geçmiştir. Enerji kanallarının açılması, kan dolaşımının hızlanması, nemden kaynaklanan patojen faktörlerin ortadan kaldırılması, arındırma işlemi, böbreklerin ve vücut enerjisinin iyileştirilmesi yanında metabolizmanın uyarılması, bağışıklık sistemini güçlendirilmesi, iç enerjinin üretilmesi ve vücudun canlılığa kavuşması gibi faktörlerde yardımcı olur.

103. Fohow Enerji Balsamı hangi bileşenlerden oluşmaktadır?

Fohow Enerji Balsamının ana bileşenleri şunlardır: İsviçre elması kök hücreleri, resvaratol, Fransız çam kabuğu ekstresi ve diğer geleneksel şifalı bitkilerdir.

- 1) İsviçreli elmanın kök hücrelerinin özü cilt kök hücrelerinin % 80'inin yenilenmesini hızlandırır, iyileşmeyi hızlandırır, yaşlanma sürecini yavaşlatır.
- 2) Resveratrol, sirtuin genlerinin (uzun ömür proteini) işlevliğini artırır, hücrelerdeki enerji düzeyini üst düzeyine çıkarır. Resveratolun ödem giderici özelliği (Antienflamatuvar) aspirinden 60 kat daha kuvvetlidir. Antioksidan etkisini ele alacak olursak (serbest radikallerin bir düzene alınması) o da OPC üzüm çekirdeği ekstresi ve koenzim Q10 değerlerini 40 kat aşmaktadır. Hiçbir yan etkisi yoktur, tedavi etkinliğini ve onkolojinin önlenmesini 40 kat artırır.
- 3) Fransız deniz çamının kabuğunun özü (piknogenol), C vitamininden 50 kat ve E vitamininden 20 kat daha etkili olan güçlü doğal antioksidandır. Günümüzde madde pycnogenol genellikle besin takviyelerinin bileşenlerinde bulunur ve ilaçların % 20'sinin bir bileşeninde bulunup kalp damar tedavilerinde kullanılmaktadır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün, vücudun yaşlanma sürecini etkili bir şekilde yavaşlatma aracı olarak çok popüler bir kullanımı vardır.
- 4) Wollichia ligusticum kan dolaşımını aktive eder ve kanın durgunluğunu giderir, soğuk algınlığına iyi gelir , analjezik etkiye sahiptir, hayati enerjiyi aktive eder, doğal antidepresan görevi görmektedir..
- 5) Zerdeçal adet döngüsünü düzene sokmaktadır, soğuk algınlığını, romatizmayı ortadan kaldırır, Qi dolaşımını artırır, ağrıları yok eder.
- 6) Pelin ya da yavşan olarak adlandırılan bitki soğuğu dağıtır, fazla nemi giderir, hemostaz sistemini geri yükler, ağrıyı ortadan kaldırır, antibakteriyel madde olarak hareket eder, cilt kaşıntısını giderir.
- 7) Çin tarçın böbrekleri ısıtır, Yang enerjisini aktive eder, balgamı giderir, öksürüğü kolaylaştırır.

104. Fohow Enerji Balsamının özellikleri nelerdir?

Fohow Enerji Balsamı güvenli, etkili ve dahası hızlı bir biçimde etkisi gösterir bir ilaçtır.

1) Formülünde ekolojik saf bitkiler ve bileşenlerinden oluşan içerikler bulunmaktadır. Ürün, koruyucu maddeler, mineral yağlar, köpük maddeleri, emülgatörler, hormonlar, renk verici maddeler ve aroma sağlayıcılar ihtiva etmemektedir.

2) Ürün geleneksel Çin tıbbına yenilikçi bir yaklaşımı barındırmaktadır. Bu sayede ısıtma etkisiyle tedavi imkanı veren, meridyenlerin temizlenmesi ve ağrılara son vermesini sağlayan bir ürün ortaya çıkmıştır.

3) Kullanımı oldukça basittir. Balsam derinin altına nüfuz ederek meridyenlerin hızlı bir biçimde ısınmasını etkin hale gelmesini sağlar. Kan dolaşımını hızlandırarak hücreleri canlandırır. Soğuk algınlığından kaynaklanan patojenik unsurları, iltihaplanma ve ağrılara son vererek enerjinin geri kazanılmasını sağlar.

105. Fohow Enerji Balsamı nasıl kullanılır?

Enerji Balsamı kullanımı oldukça basittir. Balsamı sorunlu bölgeye uygulamanız yeterli olacaktır. Örnek olarak ağrı hissettiğiniz alana bu ürünü sürerek kullanabilirsiniz. Biyoenerji masaj aleti ile Balsamın kullanılması tedavi etkisini üst seviyeye doğru çıkarmaktadır. Fohow Enerji Balsamının kullanımı neticesinde omurga bölgesinde, boyunda, omuzlarda, eklem bölgelerinde bulunan enerji kanallarının ve Chzhui, Shen Shu Yun-Quan Guan-Yuan Qi-Hai Shen-TS noktalarının desteklenmesi işlevlerini görmektedir.

106. Fohow Enerji Balsamı kullanımından sonra ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir?

Uygulamadan sonra çeşitli reaksiyonlar meydana gelebilir:

- Termal etki ile kan dolaşımının iyileştirilmesi ve meridyenlerin etkin hale gelmesi sağlanır.
- Şiddetli yanma hissi, vücutta sıcak ve soğuk hissiyatın bir anda hissedilmesi organizmada 'Soğuk Qi' dolaşımının yaşandığına işaret etmektedir.
- Kaşıntı, Qi dolaşımı ve kan akışının hızlanması, kan sıcaklığının artması ile kendini gösterir.
- Nem salınımının yaşanması, iç ortamda asitlenmenin meydana gelmesi, aşırı nem olayıdır (nemlilik faktörü)
- Uyuşma hissiyatı, kan akımı ve Qi dolaşımındaki durgunluk ya da Qi dolaşımının kan akışını hızlandırmadan meydana gelmesidir.

- Tepkime eksikliği, soğuktan kaynaklanan patojen faktörlerin toplanması, duyarlılıkta zayıflama, durgunluk ve tıkanıklık durumlarıdır.
- Daha önce yaşanmış sorunların nüksetmesi ya da şiddetlenmesi, Qi dolaşımının ve kan akışının düzenlenmesi, organizmanın adaptasyon süreçleridir.

107. Biyoenerji masaj aleti kullanıldıktan sonra hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Hiportemi yani aşırı soğumayı engellemek maksadıyla uygun ürünler tercih edilmelidir. İyileşme süreci yaşanması esnasında belli bir kötüleşme reaksiyonu olabileceği müşteriye hatırlatılmalıdır. Biyoenerji masaj aleti kullanıldıktan sonra vücut sıcak tutulmalı ve 2 saat içinde soğutulmamalı, serin duş alınmamalı, soğuk su ve demli çay tüketilmemelidir.

3. Vücudun durumuna bağlı olarak, gerekli sağlık ürünlerini zamanında alınmalıdır.
4. İyileşme esnasında ortaya çıkabilecek olası reaksiyonların hatırlatılması ve adı geçen durumların meydana gelmesi halinde alınacak önlemler belirtilecektir.

108. Biyoenerji masaj aleti kullandıktan sonra neden Feniks Elixir almak gerekiyor?

1. Biyoenerji masaj aletinin ana fonksiyonları arasında kanın toksinlerden temizlenmesi, enerji kanallarının boşaltılması, kan akışının güçlendirilmesi, metabolizmanın uyarılması ve diğer unsurlar bulunmaktadır. Yang-Sheng Fohow'un teorisine göre, bu işlev dizisi temizlik olarak adlandırılmaktadır.
2. Fohow Enerji Balsamı vücuttaki enerji düzeyini ve kan faktörlerini düzenleyen bileşenleri, hücrelerin yapılarındaki enerji düzeyini arttıran ve vücutta asitlenmeye karşı direnç meydana getiren bileşenleri ihtiva etmektedir. Vücudun hayati güçlerini anında yenileyebilir ve aktiviteleri geri kazandırabilir. Yang-Sheng Fohow'un teorisine göre, bu işlev dizisi yenilenme olarak adlandırılmaktadır.
3. Elixir Feniks Kordiseps bakımından zengindir (*Paecilomyces hepiali*). Reishi ya da lingzhi mantarı, şitaki, çöl Cistanche, kizil ve geleneksel Çin tıbbının diğer doğal tıbbi bileşenlerinin özlerini içerir. Yin ve Yang enerjilerini yeniler, Qi dolaşımı ve kanın hareketini düzenler, insanın yaşam gücünün temel dayanağı olan sağlıklı Qi dolaşımını güçlendirir, bu da patojenik enerjiyi düzene sokmaya yardımcı olur. Yang-Sheng Fohow'un teorisine göre, bu işlev dizisi düzenlenme olarak adlandırılmaktadır. Sağlığın korunmasındaki bu üç yönün kombinasyonu sağlık ve güzellik kazanımı sağlamamıza yardımcı olur.

109. Elixir Fenik ne sunmaktadır?

Elixir Feniks, Çin Halk Cumhuriyeti Tıp Enstitüsü ünlü doktorlarından Tang Zu Zhi tarafından imparatorluk reçetelerine uygun olarak yaratılmıştır. Bu ürün, geleneksel Çin tıbbı ve modern teknolojinin temel teorilerini mükemmel bir şekilde birleştiren rakipsiz bir sağlık ürünüdür.

110. Elikser Foneks ana bileşenleri nelerdir?

Çin Kordiseps mantarları, (*Paecilomyces hepiali*) R eishi ya da lingzhi mantarı, şitaki, çöl Cistanche, kızıl ve geleneksel Çin tıbbının diğer doğal tıbbi bileşenlerinin özlerini içerir.

111. Kordiseps mantarlar nedir?

Kordiseps mantarlar Çin tıbbının Yin ve Yang enerjisini düzenleyebilen eşsiz bir tıbbi üründür. Çin dilinde bu kelimenin tercümesi, 'Kışın kurt, yazın ise bitkidir' Bu mantar türü belli başlı bazı kelebek *Hepialide* (Yarasa Kelebeği) tırtıllarının üzerinde bulunurlar. Bu madde geleneksel Çin Tıbbında tamir edici ve düzenleyici olarak kullanılmaktadır. 'Bitkisel ilaçların kralıdır.' Bitkisel ilaç değerleri için yapılan eski çalışmalar Kordiseps mantarlarını eczacılığın yeni derlemesi olarak değerlendirmektedir. Tatlı bir aroması bulunmaktadır. Doğal olarak ılık bir yapısı vardır. Akciğer ve böbreklerin çalışmasına yardımcı olur. Hemostazı geliştirerek, balgam sökülmesine yardımcı olur. Qi dolaşımını doldurur, Yang ısını yükseltir, Yin düzenlenmesine yardımcı olur. Karaciğer ve böbreklerin beslenmesini sağlar, dalak ve mideyi güçlendirir, kemik ve kasların daha iyi olmasını sağlar. Modern tıbbi çalışmalar göstermektedir ki Kordiseps mantarların proteinler, yağlar, lifli yapılardan, karbonhidratlar, multivitaminler, cordycepin, cordycepic asit, cordyceps polisakkarit, multiamino asitler ve ayrıca vücut tarafından ihtiyaç duyulan demir, fosfor, kalsiyum, çinko, manganez, selenyum ve diğer besin maddelerini içermektedir. Kronik nefrit tedavisi, kronik böbrek yetmezliği, kronik bronşit, kronik sarılık, koroner kalp rahatsızlıkları, aritmi, neoplazmalar, hiperlemler ve cinsel iktidarsızlık gibi sorunlar için onun kullanılması mümkündür.

112. Kordiseps mantarlar hangi tıbbi iyileştirme özelliklerine sahiptir?

Eski zamanlardan günümüze tıp temsilcileri ve Yang-Sheng teorisi Kordiseps mantarlarını araştırmakta ve onun şu eşsiz tıbbi özelliklerini ortaya koymaktadırlar:

1. Bağışıklık sistemini düzenler
2. Solunum sistemi çalışmasını düzenler
3. Kalbin işlevini artırır
4. Karaciğer fonksiyonunu artırır
5. Akciğer fonksiyonunu artırır
6. Antitümör etkisi vardır
7. Kan oluşumu sürecini düzenler
8. Kan lipitlerini düzenler
9. Hücresel enerjiyi artırır, yorgunluğu giderir

10. Virüs ve bakteri direncini artırır, merkezi sinir sistemi çalışmasını düzenler, cinsel işlevi güçlendirici özelliği vardır.

113. Reishi ya da lingzhi mantarı nedir?

Reishi ya da lingzhi mantarı uzun zamandan beri mutluluğun, zenginliğin, güzelliğin, uzun ömrün sembolü olarak bilinmektedir. Bunun haricinde ilahi bitki ve mucizevi bitki olarak adlandırılmaktadır. Çin'de eski zamanlardan beri bu mantar tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Bu mantar besleyici ve vücut direncini artırıcı bir özelliğe sahiptir. Organizmanın direncini artırır. Geleneksel inanca göre Reishi ya da lingzhi mantarı insanları hayata döndürerek ölümsüzlük özelliği vermektedir. Şennun Bitki Sağlığı kitabına göre bu mantar *"Doğal canlılığı tekrar doldurur, toksik değildir, uzun süreli kullanımı zarar vermez vücut, refahını geliştirir, Qi dolaşımını yeniler, canlandırır ve yaşamı uzatır"*.

Tarihi araştırmalara bakıldığında bu mantarlarla alakalı olarak şunlar denmektedir. *Reishi ya da Lingzhi mantarı hafif tatlı acımsı bir aromaya sahiptir. Kalpteki, ciğerlerdeki ve böbreklerdeki enerji kanallarının açılması işlevlerini görmektedir. Nötr bir yapıda olup, zehirsizdir.*

Genel olarak tükenmişliğin düzenlenmesi, öksürük, nefes darlığı, uykusuzluk sorunlarını yerine getirir, Qi dolaşımını ve kanı güçlendirir, tohum üretimini artırır, eklem için faydalıdır, yatıştırıcı bir etkiye sahiptir, kasları güçlendirir, cildi iyileştirir, zihinsel kapasiteyi artırır, mantarın uzun süreli kullanımı sağlığı iyileştirir, vücudu canlandırır ve uzun ömür verir.

Modern tıbbi araştırmalar göstermektedir ki bu mantara ait olan etkin bileşenler 10 temel gruba bölünebilir. Polisakkarit Ganoderma, polipeptitler, terpenler ile 16 tip amino asit bulunmaktadır. (Bunlardan 7 tanesi vücut açısından hayati öneme sahip maddelerden oluşur.), proteinler, steroller, coumarin, mannitol, alkalodiy, organik asitler (ağırlıklı olarak Fumarik asit) Ayrıca Ge, P, Fe, Ca, Mn, Zn, vb gibi öğeleri de bünyesinde bulundurur. Reishi ya da lingzhi mantarı çift yönlü düzenleme sağlar, kan damarlarının kalp ve beyin, sindirim, sinir etkinliği, iç salgı, solunum, kas ve iskelet sistemlerini etkileyen hastalıkların tedavisinde yardımcı olur. Reishi ya da lingzhi mantarı karaciğerlerdeki patolojik değişiklikler, uykusuzluk ve erken yaşlanma gibi durumlar için harika bir etkiye sahiptir.

114. Reishi ya da lingzhi mantarları tedavilerde hangi fonksiyonları yerine getirirler?

Reishi ya da lingzhi mantarı, iki yönlü düzenleyici bir etkiye ve hastalıkların tedavisinde yardımcı bir etkiye sahiptir. Kalp ve beyin damarları, sindirim, sinir aktivitesi, iç salgı, solunum, kas-iskelet ve diğer birçok vücut sistemini etkiler. Karaciğerlerde yeni meydana gelmiş patolojik değişimlerin düzenlenmesi, uykusuzluk ve yaşlanma süreçlerinde belirgin bir tedavi edici özelliğe sahiptir. Bunların haricinde bir dizi tedavi edici etkisi vardır. Bunlar:

1. Antitümör aktivitesi
2. Karaciğerin korunması ve arındırılması
3. Yaşlanma süreçlerinin yavaşlaması
4. Ruhsal bozukluklardan korunma
5. Kalp damar sistemi üzerindeki faydalı etkileri
6. Yaşlanma karşıtı etkiler
7. Alerjilere karşı koruma efekti
8. Kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi
9. Romatizma ile vücut üzerinde yararlı etkiler
10. Solunum sistemi üzerinde faydalı etkileri

115. Elikser Feniks diğer bileşenlerin ana işlevleri nelerdir?

Bunun haricinde Reishi ya da lingzhi ve kordiseps mantarları, şitaki, kokulu mührüsüleyman, ophiopogon ve geleneksel Çin tıbbına ait şifalı otlar ve bileşenleri ihtiva eder. Şitaki, karaciğer ve böbrekleri düzenler, dalağın yapısını güçlendirir, Qi dolaşımını yeniler ve zihinsel stresi hafifletir. Kokulu mührüsüleyman bitkisi ise vücuttaki kuruluşu düzenler, yin sistemini besler, sıkıntıyı hafifletir, susuzluk hissini ortadan kaldırır. Japon ophiopogon bitkisi de Yin sistemini tamamlar, akciğerler ve mide için faydaları vardır. Vücuttaki sıvı oranını artırır, kalbi temizler, stresi azaltır.

116. Elikser Feniks faydaları nedir?

1. Doğal hammaddeler kullanılarak güvenilir ve yetkili bir üretici tarafından imal edilmiştir.
2. İleri teknoloji kullanılmış, yoğun konsantre özü içermektedir.
3. Yin ve Yang'ın yenilenmesi, akciğerler ve böbrekler üzerindeki etkisi vardır.
4. Mükemmel tat, uygun ambalaj özelliklerini barındırır.

117. Elikser Feniks kimler tarafından alınmalıdır?

1. Kanser rahatsızlığı çeken insanlar tarafından,
2. Akut veya kronik nefrit, böbrek yetmezliği, böbreklerde işlev kaybı, üremi ve şeker hastalığı ile uğraşan insanlar tarafından,
3. Akciğer hastalıkları ile iltihaplanma, tüberküloz, kronik bronşit ve nefes darlığı ile mustarip olanlar,

4. Kalpte miyokardit, aritmi rahatsızlığı olanlar, serebral apopleksi, serebral tromboz, anjiyoskleroz, hiperlipemi, hipertansiyon, hipotansiyon şikâyeti olan kişiler,
5. Akut, kronik sarılık rahatsızlık ile karaciğerin sirozu rahatsızlığı olanlar,
6. Ağrı şikâyeti çekenler,
7. Yaşlı ve orta yaştaki insanlar, beden fonksiyonları yüzünden yaşam tarzı zayıflamış olan insanlar.

118. Elikser Feniks nasıl uygulanır?

Günlük alınabilecek dozaj, bireysel sağlık durumuna bağlıdır. Genel anlamda alınabilecek ortalama doz günlük bir flakon ve üzeri olarak kabul edilir. Yardımcı ilaç olarak kullanılan bu ürünün miktarı rahatsızlık derecesine göre belirlenecektir. Hafif hastalık durumlarında alınması tavsiye edilen doz miktarı günlük 1-2 flakon şeklindedir. Ağır hastalık durumlarında ise alınması tavsiye edilen doz günde 2-4 flakondur. Şeker hastalığı, üremi hastalıkları ile bunların oluşum evrelerinde, ağır hastalıkların ışın tedavisi ya da kemoterapi hallerinde günlük 4-6 flakon kullanılması tavsiye edilir.

Sabah ve akşam yemekten önce kullanılması tavsiye edilir. Muhafaza edilme koşulları: Serin ve kuru yerde ya da buzdolabında muhafaza ediniz.

119. Fohow Biyoenerji masaj aleti ile kullanımı ile beraber Fohow Enerji Balsamı ve Elikser Feniks haricinde firmaya ait başka tedavi ürünü kullanmak gerekiyor mu?

Fohow firmasının üretmiş olduğu tüm ürünler eski tariflere uygun olarak üretilmiş olup içeriğinde sadece doğal malzemeler ve yüksek teknoloji ile alınan bitki özleri bulunmaktadır. Şirketin ürünleri, farklı sağlık koşullarına sahip insanlar için uygun bir etkiye sahiptir. Her organizmanın bireyselliği nedeniyle, düzenleme yöntemleri farklı olabilir. Bireysel durum ve genel sağlık değerlendirmesinin sonuçları alındıktan sonra yönlendirilmesi yapılan ürünün tercih edilmesi önerilir. Bu yaklaşımı benimsedikten sonra sağlığınıza ve güzelliğinizi koruyabilirsiniz.

'Biyoenerji Masaj Cihazı Fohow'

Sıkça Sorulan Sorular'

Fohow Eğitim Birimi

Desteğiyle

fohow.cc__